


BD Eclipse™ Needle

Important usage guidelines

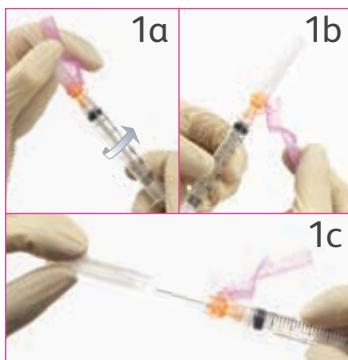

1. Attachment

1a. Attach the BD Eclipse™ Needle to a BD Luer-Lok™ syringe.

1b. Pull back the safety cover.

1c. Remove the clear needle shield.

NOTE: Bevel Up = Safety Cover Up




2. Aspiration

Draw up medication in accordance with your institution's established protocol.



3. Injection

Administer medication in accordance with your institution's established protocol.

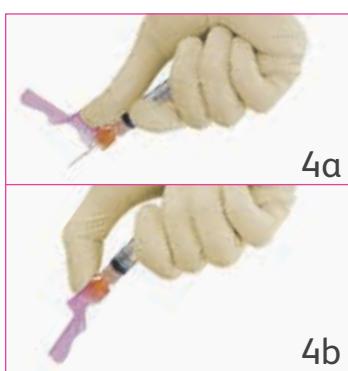

4. Activation

Activate safety mechanism immediately after injection.

4a. Center your thumb or forefinger on the textured finger pad.

4b. Push the safety cover forward over the needle until you hear or feel it lock. Visually confirm that the needle is covered.

If unable to activate, discard immediately in an approved sharps container.


Use one handed technique and activate away from self and others. For greatest safety, ONLY use the wide textured finger pad area to activate safety cover.

Discard after single use in an approved sharps container in accordance with applicable regulations and institutional policy.

Remember

- The BD Eclipse™ needle is not to be used with luer slip syringes as the needle may become disengaged from the syringe when activating the safety cover.
- Follow your institution's established protocol for aseptic technique and skin preparation.
- Follow your institution's policy for safe disposal of all medical waste.
- Activation of the protective mechanism may cause minimal splatter of any fluid that is remaining in the needle after injection.

Aiguille Eclipse^{MC} de BD

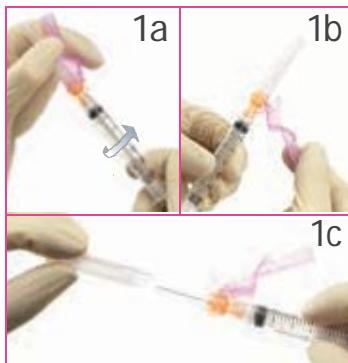

1. Raccordement

1a. Fixer l'aiguille Eclipse^{MC} de BD une seringue à embout Luer Lock^{MC} de BD.

1b. Retirer le protecteur de sécurité.

1c. Retirer le protège-aiguille transparent.

REMARQUE : Biseau = protection de sécurité



2. Aspiration

Aspirer le médicament en suivant le protocole de l'établissement.



3. Injection

Administrar le médicament en suivant le protocole de l'établissement.



4. Activation

Activer le mécanisme de sécurité immédiatement après l'injection.

4a. Placer le pouce ou l'index au milieu du coussinet texturé.

4b. Pousser le couvercle de sécurité vers l'avant sur l'aiguille jusqu'à ce qu'on entende ou ressente le verrouillage.
Confirmer visuellement que l'aiguille est couverte.

Si le dispositif ne s'active pas, jeter immédiatement la seringue dans un récipient pour objets pointus approuvé.

Manipuler d'une seule main et activer le dispositif loin de soi et à l'écart des autres.
Pour plus de sécurité, N'UTILISER QUE la partie large du coussinet texturé pour activer le protecteur.

Jeter après usage dans un contenant pour objets pointus approuvé, en respectant les règlements de l'établissement en vigueur.

À retenir

- L'aiguille Eclipse^{MC} de BD ne s'utilise pas avec des seringues Luer-Slip. Elle risque de se détacher de la seringue à l'activation du protecteur de sécurité.
- Suivre le protocole de l'établissement pour assurer l'asepsie et préparer la peau.

- Suivre les lignes directrices de l'établissement relatives à l'élimination des déchets médicaux.
- L'activation du dispositif de protection risque de causer la projection de minuscules quantités de liquide qui reste dans l'aiguille après l'injection.